


# VERPACKUNGSANWEISUNG FÜR DEN RÜCKVERSAND DER BENUTZTEN REAGENZEN

## Benutzte Küvetten- / Pipettier-Tests

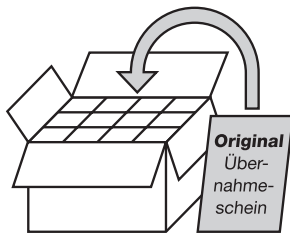

**i** Nur 1 **Übernahmeschein** pro **Rücksendung/Abholauftrag** in einen **Karton** packen.

- Möglichst viele Testpackungen sammeln
- Polstermaterial und Versandkarton von der Anlieferung benutzen
- Küvetten fest verschließen und **aufrecht stehend** in die **Original-Testpackungen** packen
- Testpackungen nicht zukleben und **aufrecht stehend** in den Karton packen




**Cyanidhaltige Testpackungen immer separat verpacken.**  
(LCK 306, LCK 308, LCK 360, LCW 032)

## a. Rücksendung als Limited Quantities (LQ)


### Gilt für die Tests:

APC ..., GCA ..., LCA ..., LCK ..., LCW ... (ohne LCW 8..),  
HACH TNT-Tests (CSB, Nitrat, ...)

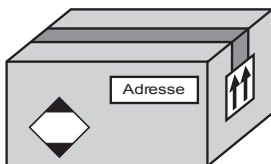

- Versandkarton zukleben
- LQ-Aufkleber
- Adressaufkleber
- Alle anderen Gefahrgutaufkleber und UN-Nummern vom Hinversand durch **überkleben unkenntlich** machen
  - durchstreichen reicht nicht aus!
  - abreißen beschädigt den Karton!
- Höchstzulässiges Gesamtgewicht von **30 kg** pro Karton nicht überschreiten

## Benutzte Kanister / Flaschen / Sammelgefäße

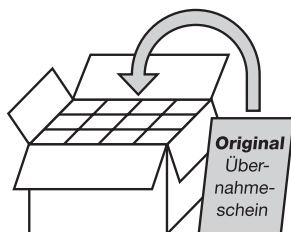

**i** Nur 1 **Übernahmeschein** pro Rücksendung/Abholauftrag in einen Karton packen.

- Kanister und Flaschen mit den **Original-Verschlüssen** fest verschließen
- Kanister und Flaschen **aufrecht stehend** in den Karton packen
- Polstermaterial und Versandkarton von der Anlieferung benutzen


### a. Rücksendung als Limited Quantities (LQ)

**Gilt für die Reagenzien:**

- LCW 870 PHOSPHAX sc Reinigungslösung
- LCW 830 AMTAX compact-Flasche
- LCW 811 AMTAX Reinigungslösung
- LCW 841 TOCTAX-Flasche
- LCW 800 Schwefelsäure-Flasche
- LCW 801 DPD-Sulfat
- BCF 398 Salzsäure-Flasche



**LCW 811 AMTAX Reinigungslösung immer separat verpacken.**

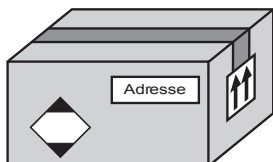


- Versandkarton zukleben
- LQ-Aufkleber
- Adressaufkleber
- Alle anderen Gefahrgutaufkleber und UN-Nummern vom Hinversand durch **überkleben unkenntlich** machen
  - durchstreichen reicht nicht aus!
  - abreißen beschädigt den Karton!
- Höchstzulässiges Gesamtgewicht von **30 kg** pro Karton nicht überschreiten

## b. Rücksendung als Gefahrgut

### Gilt für die Reagenzien:

- LCW 805/820 PHOSPHAX/PHOSPHAX inter-Kanister: **UN2796**
- LCW 834 PHOSPHAX compact-Flasche: **UN2796**
- LCW 869 PHOSPHAX sc-Flasche: **UN2796**
- BCF1009 in LCW865/866/871/885/886/889 AMTAX sc-Flasche: **UN1824**
- BCF851 in LCW840 TOCTAX-Kanister B:  
(Kanister A: kein Gefahrgut) **UN1805**

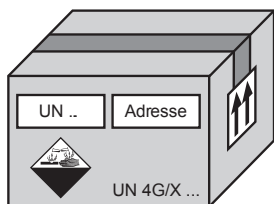


- Pro Karton nur Gefahrgüter mit **gleicher UN-Nummer** packen
- Versandkarton zukleben
- UN-Zulassung des Kartons muss sichtbar bleiben
- UN-Nummer eintragen
- Klasse 8-Aufkleber
- Adressaufkleber
- Alle anderen Gefahrgutaufkleber und UN-Nummern vom Hinversand durch **überkleben unkenntlich** machen
  - durchstreichen reicht nicht aus!
  - abreißen beschädigt den Karton!
- Höchstzulässiges Gesamtgewicht des Kartons darf nicht überschritten werden (z. B.: UN 4G/X25/... → max. **25 kg**)

## c. Rücksendung – kein Gefahrgut

### Gilt für die Reagenzien:

- BCF... in LCW802 AMTAX/AMTAX inter/2-Kanister
- BCF... in LCW823/893 PHOSPHAX sigma-Kanister
- BCF689 in LCW 840 TOCTAX-Kanister A
- BCF834 Abfall-Lösung aus GCA100/200 GANICHEM:  
Rücknahme der Abfallflaschen
- BCF885 Abfall-Kanister von LCW032 Mangan
- TIM AQUA: Ausschließlich Rücknahme der Abfallkanister
- ACCUVAC: Ampullen in den entsprechenden Abfallgefäßen sammeln
- Diverses (z.B. Chemkey®, Pipettenspitzen)
- **und restliche nicht aufgeführte LCW8..-Reagenzien**

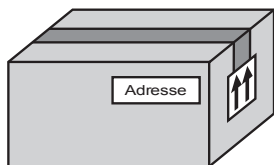

- Versandkarton zukleben
- Adressaufkleber
- Alle anderen Gefahrgutaufkleber und UN-Nummern vom Hinversand durch **überkleben unkenntlich** machen
  - durchstreichen reicht nicht aus!
  - abreißen beschädigt den Karton!



**Für die Rücksendung dürfen nur Abfallbehälter von HACH LANGE verwendet werden.**

Abfallgefäße beim Kundenservice bestellen ☎ **0800-20 81 597**

## **HACH LANGE GMBH**

Willstätterstraße 11

D-40549 Düsseldorf

Tel. +49 (0)2 11 52 88-0

Fax +49 (0)2 11 52 88-143

info-de@hach.com

www.hach.com



*Be Right™*